

1-STD Deoxynivalenol (DON) ELISA Kit

NED319 – 96 kuyucuk

Standart Eğri Aralığı: 0 – 8100 ppb

Örnek Tipi: Tahıl, Yem, vb.

Çapraz Reaksiyon: Deoxynivalenol: %100; 3-Acetyldeoxynivalenol: %1

Bilgilendirme

Fusarium graminearum tarafından üretilen Deoxynivalenol, mısırdaki (püskül çürümesi), buğdayda ve arpada (Fusarium baş yanıklığı veya uyuz) yaygın olarak bulunur. Bu toksinler, tahılların fusarium türleriyle teması sonucu tarlada zaten üretilir. Deoxynivalenol, gastrointestinal tahriş edici ve protein sentezinde inhibitördür. Akut toksik dozlar hastalığa neden olur. Çiftlik hayvanları, büyümede gecikme ve bağışıklık sisteminde baskılanma ile reaksiyon göstererek enfeksiyonlara karşı yüksek hassasiyet gösterirler. Bu kit, son derece hassas bir tespit sistemi olup, özellikle tahıllarda, yemlerde, hububatlarda ve birada Deoxynivalenol kontaminasyonlarının hızlı bir şekilde ölçülmesinde etkilidir.

Uygulama

1-STD Deoxynivalenol (DON) ELISA Kiti tahıl ve yem gibi örneklerdeki Deoxynivalenol (DON) tespit etmek için indirect competitive enzyme-linked immunoassay (ELISA) yöntemini kullanır. Kit, antijen kaplanmış plaka, HRP konjugatı, antikorlar, 1 standart (zero) ve diğer destekleyici reaktiflerden oluşur. Tespit sırasında, standart veya numuneler eklendiğinde, numunelerdeki DON, anti-DON antikorlarıyla birleşmek için eşleşmiş antijenlerle rekabet edecektir. HRP konjugatı eklendikten sonra, TMB substratları ile renklendirme yapılır. Numunelerin absorbans değeri, DON içeriğiyle negatif bir korelasyona sahiptir. Son olarak, numunedeki DON toksin içeriği Nepenthe analiz yazılımı kullanılarak hesaplanabilir.

Kit İçeriği ve Saklama Koşulu

Kitin raf ömrü 12 aydır ve 2-8 °C'de saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

İçerik	Miktar
ELISA Microplakası (Ayrılabilir plaka)	8 kuyu x 12 strip
Standartlar (0 ppb)	1 mL
Antikor Solüsyonu (mavi kapak)	5.5 mL
HRP Konjugatı (kırmızı kapak)	5.5 mL
Substrat A Solüsyonu (beyaz kapak)	6 mL
Substrat B Solüsyonu (siyah kapak)	6 mL
Durdurma Solüsyonu (sarı kapak)	6 mL
20X Konsantre Yıkama Solüsyonu (beyaz kapak)	40 mL
Çözdürme Solüsyonu (sarı kapak)	50 mL
Yapışkan Membran	1 adet
Kullanım Kılavuzu	1 adet

Çalışma İçin Gerekli Diğer Materyaller

- Mikrolaka okuyucu,
- Öğütücü (katı numunelerin homojenizasyonu için),
- Vorteks karıştırıcı (çalkalama ve karıştırma için),
- Santrifüj veya filtre kağıdı,
- Hassas Terazî,
- Mikro pipetler (tek kanallı ve çok kanallı),
- Metanol.

Çalışma Öncesi Uyarılar

- Testten önce, reaktifler ve numuneler oda sıcaklığına (25°C) getirilmeli ve dengelenmelidir.
- Tüm reaktifler kullanımdan önce hafifçe ters çevrilerek karıştırılmalıdır. Köpürtmeye neden olmayınız.
- Çalışma başlatıldıktan sonra, tüm adımlar kesintisiz ve önerilen süre sınırları içinde tamamlanmalıdır.
- Yıkamadan hemen kuyucukların kuru olduğundan emin olduktan sonra hızlı bir şekilde sonraki adıma geçiniz.
- İnkübasyon sırasında mikro plakaları yapışkan membranla örtünüz.
- Tüm reaktiflerin kapaklarını kullanımdan hemen sonra kapatınız ve şişe kapaklarını değiştirmeyiniz.
- Çapraz kontaminasyonu önlemek için her numune ve solüsyon için ayrı bir tek kullanımlık uç kullanınız.
- Standart eğrinin OD değerleri, gerçek zamanlı test performans koşullarına (örneğin, operatör, pipetleme tekniği, yıkama tekniği veya sıcaklık etkileri) göre değişebileceğinden, kullanıcı her test için bir standart eğri oluşturmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız.
- Farklı lotlardaki reaktifleri birleştirerek karıştırmayınız.
- 0 ppb'lik absorbands değeri 0,5'in ($A_{450nm} < 0,5$) altındaysa, reaktifin metamorfik olabileceği anlamına gelir.
- Substrat solüsyonu renksiz olmalıdır, aksi takdirde atınız.
- İşlem sırasında kullanılan laboratuvar ekipmanlarının (mikropipetler, ELISA okuyucu vb.) hem hassasiyetini hem de doğruluğunu kontrol ediniz.
- Laboratuvarıda sigara içmeyin, yemek yemeyin, içecek tüketmeyin veya pipetleme işlemini ağız yoluyla yapmayınız.
- Çalışma sırasında mutlaka tek kullanımlık eldiven giyiniz.
- Substrat ve durdurma çözeltisinin cilt ve mukoza ile temasından kaçınınız (olası tahriş, yanık veya toksisite tehlikesi). Temas halinde, etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayınız.
- Kimyasal ürünlerin kullanımı ve imhası, iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uygun olarak yapılmalıdır.
- Lütfen kuyucuklardaki içerikleri eşit şekilde karıştırın ve plakayı iyice yıkayın. Tekrarlanabilirlik büyük ölçüde yıkama adımının tutarlılığına bağlıdır.

Ön Hazırlık

Lütfen laboratuvar malzemelerinin temiz olması gerektiğini unutmayınız. Örnek ve reaktiflerin birbirlerine karışmalarını önlemek için tek kullanımlık pipet uçları kullanınız.

Çözelti Hazırlama:

Çözelti 1: 1X Yıkama Tamponu

Konsantre yıkama tamponunu (20x) 20 faktörüyle seyreltiniz (1 birim Konsantre yıkama tamponuna 19 birim Deiyonize su ekleyiniz).


Numune Hazırlama:

Tahıl, Yem, vb. Örneği Hazırlama İşlemleri:

1. İyice öğütülmüş numuneyi (20 mesh elekten geçen) iyice karıştırınız ve numune alınız.
2. 5.0 g homojenize numuneyi 50 mL'lik bir santrifüj tüpünde tartınız, 25 mL deiyonize su ekleyiniz ve 5 dakika karıştırınız.
3. Karışımı filtre kağıdı kullanarak süzünüz veya oda sıcaklığında 4000 rpm'de 10 dakika santrifüjleyiniz.
4. Üst sıvıdan 500 µL yeni tüpe aktarınız ve üzerine 500 µL çözündürme solüsyonu ekleyiniz, tamamen karıştırınız.
5. Test için 50 µL alınız.

Numune Seyreltme Oranı: 10 - Tespit limiti: 100 ppb

ELISA Protokol Şablonu

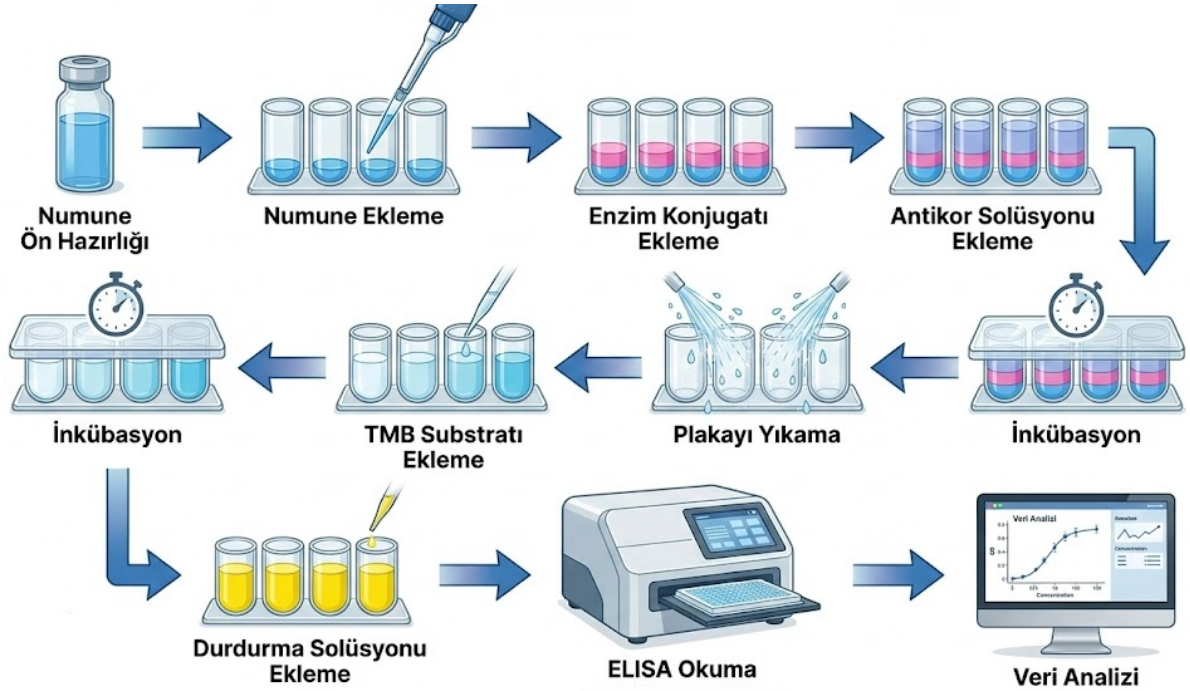

ELISA Protokolü

Tüm reaktifleri ve numuneleri yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında bekletiniz. Kullanmadan önce reaktif şişelerini hafifçe alt üst ediniz.

Mikroplaka çerçevesini ve gerekli sayıda kuyucuğu çıkarınız. Kullanılmayan mikroplaka kuyucuklarını, verilen kurutucuyla birlikte kapalı poşete koyunuz. Kalan kiti buzdolabında 2-8°C'de saklayınız.

- 1. Numaralandırma:** Standart ve numuneleri karşılık gelen mikrokuyucuklara sırayla numaralandırınız, her numune ve standart için 2 kuyucuklu tekrar önerilir.
- 2. İnkübasyon:** Numaralandırılmış standart kuyucuğuna 50 µL standart, her numune kuyucuğuna ise 50 µL numune ekleyiniz, ardından tüm kuyucuklara 50 µL HRP konjugatı ekleyiniz. Son olarak her kuyucuğa 50 µL antikor solüsyonu ekleyiniz. Mikroplakayı yapışkan membranla örtünüz ve oda sıcaklığında 30 dakika inkübe ediniz.
- 3. Yıkama:** Yapışkan membranı dikkatlice açınız ve kuyucuklardaki sıvıyı ters döndürerek dökünüz. Her kuyucuğa 300 µL 1X Yıkama Tamponu pipetleyiniz ve ters çevirerek dökünüz, bu işlemi 5 kez tekrarlayınız. Plağı ters çeviriniz ve kağıt havlu üzerine kalan sıvının akması için vurunuz. (Kabarcık kalmadığından emin olunuz).
- 4. Substrat:** Her kuyucuğa 50 µL A Substrat Reaktifi ve ardından üzerine 50 µL B Substrat Reaktifi ekleyiniz. Karanlıkta ve oda sıcaklığında 15 dakika reaksiyona girmesine izin veriniz. (Mavi renk çok soluksa, reaksiyon kontrollü şekilde uzatılabilir.)
- 5. Durdurma:** Her kuyucuğa 50 µL Durdurma Solüsyonu ekleyiniz.
- 6. Okuma:** Bir mikro plaka okuyucu ile 450 nm'de (Referans dalga boyu 595 veya 630 nm) okutarak Optik Yoğunluğu (OD değeri; absorbans değeri) belirleyiniz. (Durdurma solüsyonu eklendikten 10 dakika içinde okuma tamamlanmalıdır.)

Sonucun Yorumlanması

1-STD ELISA Kitini analiz edebilmek için destek@nepenthe.com.tr adresine e-posta göndererek ücretsiz Nepenthe Analiz Yazılımını temin ediniz. Kit kutusunda yazan LOT numarasını yazılımdaki PARTİ NO alanına elle giriniz. B/Bo (%) değerleri otomatik olarak yüklenecektir. Ardından ölçüm verilerinizi Numune OD Değeri alanına elle giriniz veya yapıştırınız, otomatik olarak sonuç verilecektir.